

"EINE SICHERE PARTNERSCHAFT
FÜR IHRE GESUNDHEIT"

mediland
products & more

products & more



Matthys-Drain® Steriles Besteck zur Drainage von Luft und Flüssigkeiten aus Körperhöhlen

(nach Prof. Matthys)



- Katheter kann überall gelegt werden
- kein operativer Eingriff und zusätzliches chirurgisches Besteck nötig
- kleine Stichwunde, keine Narbenbildung
- Mobilität des Patienten bleibt erhalten
- Liegezeit bis zu 30 Tagen
- Transport des Patienten über größere Höhendifferenzen und im Flugzeug möglich
- Doppelryckschlagventil erlaubt spontane Drainage oder spontanes Absaugen von Luft und Sekret mit 30 ml Spritze

Anwendungsbereiche

- Pneumothorax
- Pleuraergüsse
- Pleuraempyeme
- Ascites
- Perikardergüsse
- Paravertebralabszesse

BÖ-1000053 Set A OD 2,7mm Länge 450mm


BÖ-1000088 Set B OD 3,3mm Länge 450mm

mediland GmbH • Im Fuchshau 22 • D-73635 Rudersberg (Germany)
Tel.: +49 (0) 7183 30 78 01 0 • Fax: +49 (0) 7183 30 78 01 11 • www.mediland.de • info@mediland.de

Allgemeine Produktinformation

Artikelbezeichnung:

Matthys-Drain®.

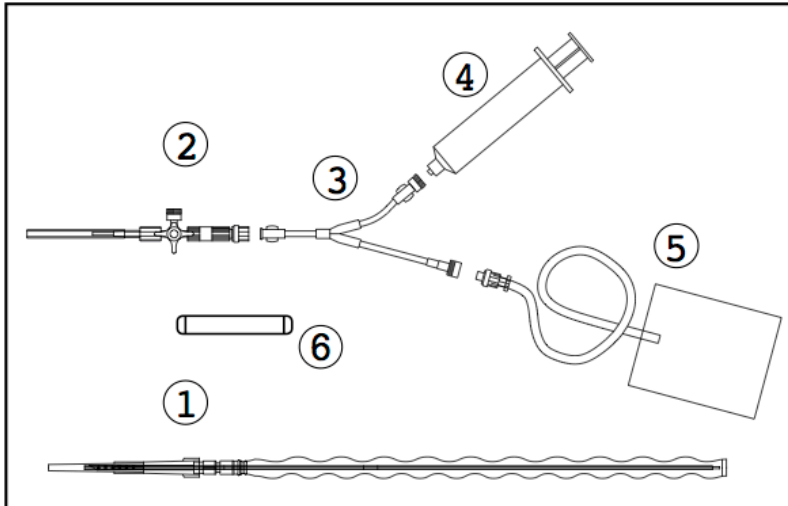

Pos. Bezeichnung

- 1 Punktions Einheit
(Kanüle, Katheter, Katheterhülle)
- 2 Aufsteckeinheit
(3-Wegehahn, Kanüle stumpf,
Rückschlagventil)
- 3 Rückschlagventileinheit
Verbinder, Rückschlagventil
- 4 Spritze, 30 ml
- 5 Sekretbeutel, 2000 ml
- 6 Knickschutz